

HUNTLEIGH

Anwendungshinweise

Kullanım Talimatları

Brugsvejledning

Instrucciones de uso

使用

ήσης

Mode d'emploi

Bruksanvisning

Gebruiksaanwijzing

wijzing

BRUKSANVISNING

Brúk

atları

使用方法

Käyttöohjeet

Instruções de Utilização

Istruzioni per l'uso

Anwendungshinweise

Οδηγίες χρήσης

Anwendungshinweise

Hydroven 12 LymphAssist™ Homecare

Innhold

1. Sikkerhet	3
1.1 Advarsler	3
2. Elektromagnetisk kompatibilitet	5
3. Introduksjon	8
3.1 Om denne manualen.....	8
3.2 Tiltent bruk	8
3.3 Om Hydroven 12 LymphAssist Homecare-system.....	8
3.4 Bruksmiljø	9
3.5 Beregnet Brukerprofil	9
4. Kliniske bruksområder.....	10
4.1 Indikasjoner	10
4.2 Kontraindikasjoner	11
5. Innledende kontroller.....	12
6. Plagg- og innleggsinformasjon	13
6.1 Plaggdimensjoner.....	14
7. Hydroven 12 LymphAssist Homecare System.....	16
7.1 Plaggkoblinger.....	16
7.2 Driftsmoduser	17
7.2.1 Standby.....	17
7.2.2 Hvilemodus	17
7.2.3 Kjør-modus	17
7.3 Oppumpingsmoduse.....	18
7.3.1 LymphAssist-oppumping.....	18
7.3.2 LymphAssist System.....	19
8. Kontroller, indikatorer og alarmer	20
8.1 Typisk kontrollpanel i kjøremodus.....	20
8.2 Pumpekontroller og indikatorer	20
8.2.1 Kjør-/Standby-knapp og kjø- og hvilemodusindikatorer.....	21
8.2.2 Trykkvisning og knapper for trykkinnstilling	21
8.2.3 Visning for behandlingsinnstilling.....	22
8.3 Pumpealarm	22
8.3.1 Systemfeil	22
9. Drift.....	23
9.1 Klargjøring av systemet	23
9.2 Starte behandling.....	25
9.3 Stoppe behandling.....	25

10.Dekontaminering	26
10.1 Rengjøring.....	26
10.2 Kjemisk desinfisering.....	26
10.3 Rengjøring og sterilisering av plagg.....	26
11.Rutinemessige vedlikehold	27
11.1 Hydroven 12 LymphAssist Homecare system.....	27
11.1.1 Vedlikehold.....	27
11.1.2 Service	27
11.1.3 Serviceperiode	27
11.2 Generelt stell, vedlikehold og inspeksjon	27
11.2.1 Pumpe.....	27
11.2.2 Plagg	27
11.3 Serienummeretiketter	27
11.3.1 Pumpe.....	27
11.3.2 Plagg.....	27
12.Feilsøking	28
13.Tilbehør.....	29
14.Spesifikasjoner	30
14.1 Utstyrsklassifisering	30
14.2 Generelt	30
14.3 Miljø	31
14.4 Samsvar med standarder.....	31
15.Produktmerking.....	32
16.Avhendig ved levetidsslutt.....	34
17.Garanti og service.....	35
17.1 Servicereturer.....	35

1. Sikkerhet



Før du bruker dette utstyret, må du lese denne håndboken nøye og gjøre deg kjent med kontrollene, displayfunksjonene og bruken. Påse at alle brukere forstår sikkerhetsrutinene og bruken av enheten, da feil bruk kan føre til skader på brukeren, pasienten eller produktet.

Ha alltid denne bruksanvisningen for hånden for fremtidig referanse.

Symboler



Generelle advarsler/forholdsregler



Følg bruksanvisningen

1.1 Advarsler

IKKE bruk ikke-godkjent tilbehør eller prøv å modifisere, demontere eller på annen måte misbruke Hydroven 12 LymphAssist-systemet. Unnlattelse av å ta hensyn til dette kan føre til skader, eller i ekstreme tilfeller død.



ADVARSEL: Det foreligger mulig eksplosjonsfare ved bruk i nærheten av lettantennelige anestesimidler.



ADVARSEL: Ikke monter enheten rett over pasienten. Plasser enheten slik at den ikke vil gjøre noe skade hvis den skulle falle ned.



ADVARSEL: Ikke bruk enheten koblet til nettstrømmen hvis strømledningen er skadet.



ADVARSEL: Ikke senk noen del av enheten ned i vann eller andre væsker.



ADVARSEL: Bruk bare anbefalt tilbehør oppført i denne håndboken.



ADVARSEL: Hvis produktet koblet til annet elektrisk utstyr, er det viktig at systemet er i samsvar med EN60601-1.



ADVARSEL: Det er omsorgsyterens ansvar å sikre at brukeren kan bruke dette produktet trygt.



ADVARSEL: Sørg for at strømkabelen og slangene eller luftslangene plasseres slik at det snublefarer eller andre farer unngås, og går fri fra bevegelige sengemekanismer eller andre mulige klemmeområder.



ADVARSEL: Elektrisk utstyr kan være farlig hvis misbrukt. Det finnes ingen deler i pumpen som kan repareres av brukeren. Pumpehuset må kun fjernes av autorisert teknisk personale. Dette utstyret må ikke modifiseres.



ADVARSEL: Strømkontakten/-pluggen må være tilgjengelig til enhver tid. Ta støpselet fra stikkontakten for å koble pumpen fullstendig fra strømforsyningen.



ADVARSEL: Koble pumpen fra stikkontakten før rengjøring og inspeksjon.



ADVARSEL: Kun pumpe- og plagg-/innleggskombinasjon som indikert av Huntleigh bør brukes. Produktets korrekte funksjon kan ikke garanteres hvis feil pumpe- og plaggkombinasjoner brukes.



ADVARSEL: Poser levert med dette utstyret kan utgjøre en kvelningsrisiko. For å unngå risikoen for kvelning, må posene holdes vekk fra babyer og små barn.



FORSIKTIG: Ikke utsett systemet for åpne flammer, som sigaretter, osv.



FORSIKTIG: Ikke oppbevar systemet i direkte sollys.



FORSIKTIG: Ikke bruk fenol-baserte løsninger for rengjøring av systemet.



FORSIKTIG: Sørg for at systemet er rent og tørt før bruk eller oppbevaring.



FORSIKTIG: Kjøledyr og barn må holdes under oppsyn i nærheten av systemet.

Forventet brukstid

Hydroven 12 LymphAssist har en forventet brukstid på 7 år. For å opprettholde pumpens tilstand, må den vedlikeholdes jevnlig i henhold til planen anbefalt av din Huntleigh-distributør.

2. Elektromagnetisk kompatibilitet

Påse at miljøet som Hydroven 12 monteres i, ikke er utsatt for sterke kilder til elektromagnetiske forstyrrelser (f.eks. radiosendere og mobiltelefoner).

Dette utstyret genererer og bruker radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes riktig i henhold til produsentens instruksjoner, kan det forårsake eller utsettes for forstyrrelser. Det er typetestet i et fullt konfigurert system og er i samsvar med EN60601-1-2, som er standarden beregnet på å gi rimelig beskyttelse mot slike forstyrrelser. Om utstyret forårsaker forstyrrelser, kan fastslås ved å slå utstyret på og av. Hvis det forårsaker eller er berørt av forstyrrelser, kan ett eller flere av følgende tiltak løse problemet:

- Flytte utstyret
- flytte utstyret i forhold til forstyrrelseskilden
- Flytte utstyret bort fra enheten som det forstyrrer
- Koble utstyret til et annet uttak slik at enhetene befinner seg på ulike kretser



ADVARSEL: *Hydroven 12bør ikke brukes ved siden av eller stablet med annet utstyr. Hvis det er nødvendig at utstyret står ved siden av eller stables med annet utstyr, må det kontrolleres at Hydroven 12 fungerer som normalt i den konfigurasjonen det vil bli brukt i.*

Anbefalte separasjonsavstander mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og Hydroven 12			
Hydroven 12 er ment til bruk i et elektromagnetisk miljø der radiofrekvensforstyrrelser er kontrollerte. Kunden eller brukeren av Hydroven 12 kan hjelpe med å forhindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde en minste avstand mellom bærbart og mobilt RF kommunikasjonsutstyr (sendere), og Hydroven 12 som anbefalt under, i henhold til maksimum utgangseffekt for kommunikasjonsutstyret.			
Normert maksimal utgangseffekt for sender W	Fysisk avstand i henhold til senderens frekvens (m)		
	150 kHz til 80 MHz	80MHz til 800MHz	800MHz til 2,5GHz
	$d = 1.2 \sqrt{P}$	$d = 1.2 \sqrt{P}$	$d = 2.3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
For sendere med en maksimal utgangseffekt som ikke er angitt ovenfor, kan anbefalt separasjonsavstand <i>d</i> i meter (m) bestemmes ved hjelp av formlene for senderens frekvens, der <i>P</i> er senderens maksimale utgangseffekt i watt (W) ifølge senderens produsent. MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det øvre frekvensområdet. MERKNAD 2 Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.			

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet			
Hydroven 12 er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert under. Kunden eller brukeren av Hydroven 12 må sikre at det brukes i et slikt miljø.			
Immunitetstest	IEC 60601-testnivå	Sam-svarsnivå	Elektromagnetisk miljø – veiledning
			Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere noen del av Hydroven 12, inkludert kabler, enn anbefalt separasjonsavstand som beregnes ut fra formelen for senderens frekvens.
Ledet RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz til 80 MHz	3V	$d = 1.2 \sqrt{P}$
Utstrålt RF IEC 61000-4-3	3 Vrms 80MHz til 2,5MHz	3 V/m	$d = 1.2 \sqrt{P}$ 80MHz til 800MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ 800MHz til 2,5GHz
			der P er senders maksimale utgangseffekt i watt (W) ifølge produsenten av senderen, og d er anbefalt separasjonsavstand i meter (m). Feltstyrken fra faste RF-sendere, som fastslås ved en elektromagnetisk stedsundersøkelse ^a, skal være under samsvarsnivået i hvert frekvensområde ^b. Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av utstyr merket med følgende symbol: 
MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det øvre frekvensområdet. MERKNAD 2 Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.			
^a Feltstyrken fra faste sendere, for eksempel basestasjoner for radio (mobile/trådløse)-telefoner og mobile radioer, amatørradioer, AM- og FM-radiosendinger og TV-sendinger kan ikke forutsies teoretisk med nøyaktighet. En elektromagnetisk stedsundersøkelse bør vurderes for å beregne det elektromagnetiske miljøet som skyldes RF-sendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der Hydroven 12 brukes, overskrider aktuelt RF-samsvarsnivå ovenfor, må det kontrolleres at Hydroven 12 fungerer som normalt. Hvis det oppdages unormal ytelse, kan det være nødvendig med tiltak som å snu eller flytte Hydroven 12. ^b Over frekvensområdet fra 150 kHz til 80k HDZ bør feltstyrken være under 3 V/m.			

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet			
Hydroven 12 er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert under. Kunden eller brukeren av Hydroven 12 må sikre at det brukes i et slikt miljø.			
Immunitetstest	IEC 60601-testnivå	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljø – veiledning
Elektrostatisk utladning (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV kontakt ± 8 kV luft	± 6 kV kontakt ± 8 kV luft	Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulv er dekket med syntetisk materiale, kreves en relativ luftfuktighet på minst 30 %.
Elektrisk hurtig transient/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV for spenningsforsyningsledninger ± 1 kV for inn-/utledninger	± 2 kV for spenningsforsyningsledninger ± 1 kV for inn-/utledninger	Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig eller sykehusets strømmett.
Overspenning IEC 61000-4-5	± 1 kV linje(r) til linje(r) ± 2 kV linje(r) til jord	± 1 kV linje(r) til linje(r) ± 2 kV linje(r) til jord	Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig eller sykehusets strømmett.
Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på nettstrømskontaktene IEC 61000-4-11	<5 % U_r (>95 % fall i U_r) i 0,5 sykluser 40 % U_r (60 % fall i U_r) i 5 sykluser 70 % U_r (30 % fall i U_r) i 25 sykluser <5 % U_r (>95 % fall i U_r) i 5 sekunder	<5 % U_r (>95 % fall i U_r) i 0,5 sykluser 40 % U_r (60 % fall i U_r) i 5 sykluser 70 % U_r (30 % fall i U_r) i 25 sykluser <5 % U_r (>95 % fall i U_r) i 5 sekunder	Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig eller sykehusets strømmett. Hvis bruk av Hydroven 12 krever kontinuerlig drift under nettspenningsforstyrrelser, anbefales det at Hydroven 12 får strøm fra en avbruddsfri spenningsforsyning.
Strømfrekvens (50/60Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnetiske felt fra nettstrømfrekvensen skal være på nivåer som er normale i et offentlig miljø eller sykehusmiljø.
Merk U_r er vekselstrømspenningen for testnivået påføres.			

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk stråling		
Hydroven 12 er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert under. Kunden eller brukeren av Hydroven 12 må sikre at det brukes i et slikt miljø.		
Strålingstest	Samsvar	Elektromagnetisk miljø – veiledning
RF-utslipp CISPR 11	Gruppe 1	Hydroven 12 bruker bare RF-energi til innvendig funksjon. RF-emisjonen er derfor svært lav, og det er usannsynlig at det vil oppstå interferens med elektronisk utstyr i nærheten.
RF-utslipp CISPR 11	Klasse B	
Harmoniske utslipp IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spenningssvingninger/flimringsstråling IEC 61000-3-3	Samsvarer med	

3. Introduksjon

3.1 Om denne manualen

Denne manualen er din introduksjon til Hydroven® 12 LymphAssist Homecare-system.

Du må lese og fullt ut forstå denne manualen før du bruker systemet. Bruk denne manualen for å innledningsvis sette opp systemet, og ta vare på den som en referanse for daglige rutiner og som en veiledning for vedlikehold.

Kontakt din lokale Huntleigh salgsrepresentant, oppført på slutten av denne manualen, hvis du opplever vanskeligheter med å sette opp eller bruke LymphAssist Homecare-systemet.

3.2 Tiltenkt bruk

Den tiltenkte bruken av dette produktet er å kontrollere de kliniske tilstandene i avsnittet "Indikasjoner".

LymphAssist Homecare-system bør brukes som en del av en foreskrevet omsorgsplan detaljert i avsnittet "Indikasjoner".

3.3 Om Hydroven 12 LymphAssist Homecare-system

Systemet består av en pumpe og flerkammers arm- eller lårplagg. Valgfrie flerkammers plagginnlegg kan brukes for å øke omkretsen av arm- og lårplaggene.

Pumpen leverer luft for å blåse kamrene i plaggene via tilsluttende slanger, og muliggjør anvendelse av kontrollert trykk for å forsiktig komprimere og/eller massere lemmet.

LymphAssist-oppumping brukes når lymfe må flyttes vekk fra defekte lymfekar. Forsiktig rytmisk massasje av lemmet gjennom LymphAssist-syklusen beveger huden i lymfekretsløpets retning, og stimulerer lymfekarene, som transporterer proteiner og avfallsprodukter.

En full teknisk beskrivelse av Hydroven 12-systemet finnes i servicemanualen, delenummer SER0010, tilgjengelig fra din lokale Huntleigh salgsrepresentant.

3.4 Bruksmiljø

Hydroven 12 LymphAssist Homecare er egnet for bruk i sykehus, primærhelsetjenesten, samfunnsinnstillinger og i hjemmetn. Det må ikke brukes utendørs eller i omgivelser der det kan komme i kontakt med vann.

3.5 Beregnet Brukerprofil

Den Hydroven 12 LymphAssist HC er beregnet for bruk av alle voksne, og gir den kliniske tilstand (e) er identifisert i del 4 Bruksområder, både Indikasjoner og kontraindikasjoner, er oppfylt, og forutsatt at en passende størrelse plagget er tilgjengelig, som er identifisert i del 6.1 Garment dimensjoner.

4. Kliniske bruksområder

4.1 Indikasjoner

Intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) er effektiv i behandlingen av følgende kliniske tilstander når kombinert med et individualisert overvåkingsprogram:

- Lymfeødem.
- Primær og sekundær (inkludert post-kirurgisk, røntgen- eller kjemoterapi).

Valg bør baseres på en helhetlig vurdering av pasientenes individuelle pleiebehov.

Merk: *Disse systemene representerer et aspekt av en behandlingsstrategi. Hvis pasienten tilstand endres, bør hele behandlingsplanen gås gjennom av foreskrivende kliniker.*

Merk: *Det ovenstående er kun retningslinjer, og er ingen erstatning for klinisk bedømmelse.*

4.2 Kontraindikasjoner

IPC bør IKKE brukes under følgende omstendigheter:

- Kjent eller mistenkt dyp venetrombose (DVT), lungeemboli, tromboflebitt og akutte infeksjoner i huden, som f.eks. cellulitt.
- Dekompensert/alvorlig kongestiv hjertesvikt, pulmonalt ødem knyttet til betydelig lemmeødem eller enhver tilstand hvor en økning av væske til hjertet kan være ugunstig.
- Alvorlig arteriosklerose eller annen iskemisk vaskulær sykdom.
- Aktiv metastatisk sykdom som påvirker lemmet.

MERKNAD TIL PASIENTEN: *hvis du er usikker på om du har noen av tilstandene over, må du snakke med en lege før bruk.*



FORSIKTIG: *IPC bør brukes med forsiktighet på pasienter med følgende symptomer eller tilstander:*

- *Perifer nevropati, smerte eller følelsesløshet i lemmet.*
- *Udiagnostisert, ubehandlede eller infiserte sår, ømtålig hud, transplantasjoner eller dermatologiske tilstander som kan bli forverret av plagget.*
- *Ekstrem lemdeformering som kan praktisk vanskeliggjøre korrekt påføring av plagget.*



ADVARSEL: *Behandling bør avbrytes hvis smerte, kribling eller følelsesløshet inntreffer i lemmet under eller som et resultat av behandling.*



ADVARSEL: *I tilfelle strømbrydd eller feil hvor plagget forblir oppumpet, kobles slangen(e) fra for å tømme plagget/plaggene, og plagget/plaggene kan deretter fjernes fra lemmet/lemmene.*



ADVARSEL: *Pasienter må ikke gå eller stå når de bruker lårplagg.*

5. Innledende kontroller

Innhold (leveres med alle systemer)

Artikkel	Artikkel
1 x Hydroven 12 LymphAssist Homecare	1 x bruksanvisning

Leveringsinspeksjon

Huntleigh Healthcare Ltd tar alle forholdsregler for å sikre at varene når deg i perfekt stand. Men skader kan oppstå under frakt og oppbevaring. Vi anbefaler derfor at du gjennomfører en grundig visuell inspeksjon når apparatet mottas. Hvis det skulle foreligge skader, eller hvis det mangler deler, må Huntleigh Healthcare Ltd informeres umiddelbart.

Oppbevaring

Hvis enheten ikkal skal brukes med én gang, bør det pakkes inn i den opprinnelige emballasjen igjen etter at leveringsinspeksjonen er utført, og oppbevares tildekket ved en temperatur på mellom +10 °C og +40 °C med relativ fuktighet på 20 % til 95 % ikke-kondenserende.

Etter eksponering for ekstreme temperaturer under lagring, må pumpen få justere seg til normale driftstemperaturer i minst 12 timer før bruk. Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i fremskyndet slitasje av mekaniske komponenter.

6. Plagg- og innleggsinformasjon



ADVARSEL: Poser levert med dette utstyret kan utgjøre en kvelningsrisiko. For å unngå risikoen for kvelning, må posene holdes vekk fra babier og små barn.


Hydroven 12 LymphAssist Homecare pumpe er utviklet for å brukes med Hydroven™ 12-plagg, som er tilgjengelige i to størrelser for armer, og fire størrelser for lår. Hver lengde av arm- og lårplagg har et tilsvarende Hydroven 12 innleggsstykke som øker omkretsen med 17 cm for armplagg, og 19 cm for lårplagg.

Lengden på slangene er 140 cm fra pumpekoblingen til fot-/håndenden av plagget.


Alle plagg (armplagg, lårplagg og plagginnlegg) har mange kamre. Hvert kammer overlapper det nærliggende kammeret for å gi jevn og sømløs trykkpåføring, og forhindre trykfall eller furer på lemmene. Alle plagg har glidelåslukking. Når lukket overlapper den oppumpende kammerdelen under glidelåsen i hele lemmets omkrets, for å unngå trykfall og furing av huden under glidelåsdelen.

Lårplagget (og lårplagginnlegget) har en unik 5-kammers fotdel som gir finanvendelse av trykk på foten, og fremmer blod- og lymfebevegelse.


Plagginnlegg er tilgjengelige for arm- og lårplagg, for tilpassing til større lemmer. Når koblet til plagget og pumpen, er de utviklet for å pumpes opp i sekvens med plagget for å gi unike oppumpingsevner for større lemmer.

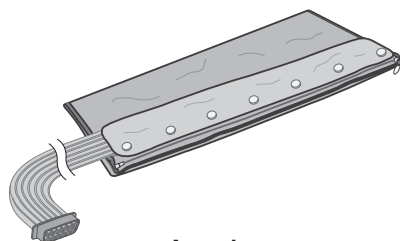


Armplagg

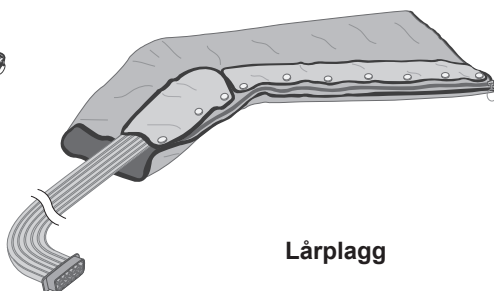

Lårplagg

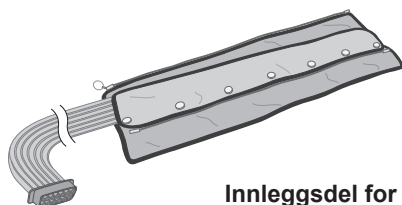

Innleggsdel for
armplagg

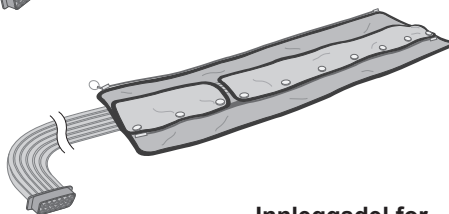

Innleggsdel for
lårplagg

6.1 Plaggdimensjoner

Lemmer bør måles og korrekt(e) plagg velges i henhold til følgende måleveiledninger og tabeller for dimensjoner.


Når korrekt plaggstørrelse fastsettes:

- Fjern evt. bandasjer, strømper og/eller store forbindinger.
- Mål omkretsen av lemmet hvor oppgitt.
- Ikke dra målebåndet stramt ved måling.
- Sørg for at plagget går over nivået for hovenhet/traume, mens komfortnivået opprettholdes.

Merk: *Plagg bør ikke være tettsittende når de er uten trykk.*

1. Armplagg:

- Lengden på plagget måles fra fingerspissene til 5 cm under armhulen, med armen rett.
- Omkretsen på plagget måles ved skulderen

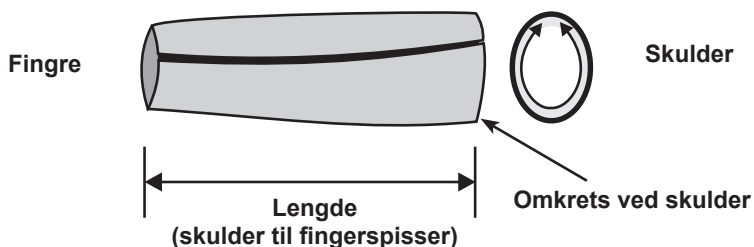


Armplaggdimensjoner		
Plaggdelnr.	316A68	316A78
Lengde (skulder til fingerspiss)	68 cm	78 cm
Omkrets (ved skulder)		
Armplagg	62 cm	62 cm
Med plagginnlegg	79 cm	79 cm
Tilsvarende innleggsdel delenr.	316AI68	316AI78
Bredde på innlegg (ved skulder)	17 cm	17 cm

Merk: *Innleggsdelen for Hydroven 12 armplagg gir 17 cm ekstra for plaggets skulderomkrets.*

2. Lårplagg:

- Det er to serier med lårplagg: standard og stort.
- Lengden på plagget måles fra hælen til 5 cm under skrittet.
- Omkretsen på plagget måles ved toppen av låret.

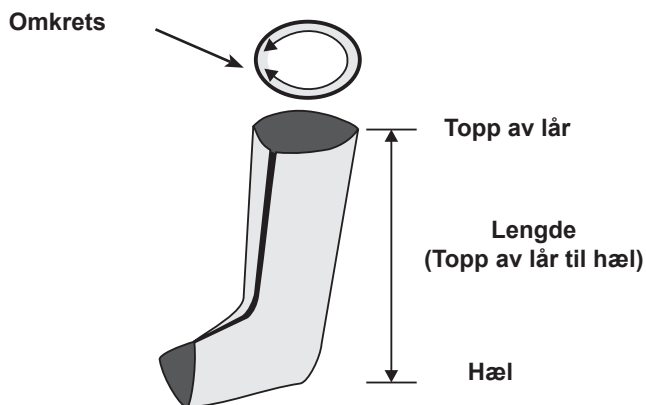


Lårplagg dimensjoner	Standard		Stor	
Plaggdelnr.	316L76S	316L84S	316L76W	316L84W
Lengde (topp av lår til hæl)	76 cm	84 cm	76 cm	84 cm
Omkrets (ved topp av lår)				
Lårplagg	71 cm	71 cm	79 cm	79 cm
Med plagginnlegg	90 cm	90 cm	98 cm	98 cm
Tilsvarende innleggsdel delenr.	316LI76	316LI84	316LI76	316LI84
Bredde på innlegg (ved topp av lår)	19 cm	19 cm	19 cm	19 cm

Merk: *Innleggsdelen for Hydroven 12 lårplagg gir 19 cm ekstra for plaggets omkrets ved topp av lår.*

Kontakt Huntleigh for mer ytterligere informasjon om plaggstørrelser.

7. Hydroven 12 LymphAssist Homecare System

Hydroven 12 LymphAssist Homecare pumpe er utviklet for bordbruk, med kontroller plassert på fronten av pumpen. Den består av et formstøpt hus med skliskre føtter på bunnen og bakdekselet, og et integrert bærehåndtak.

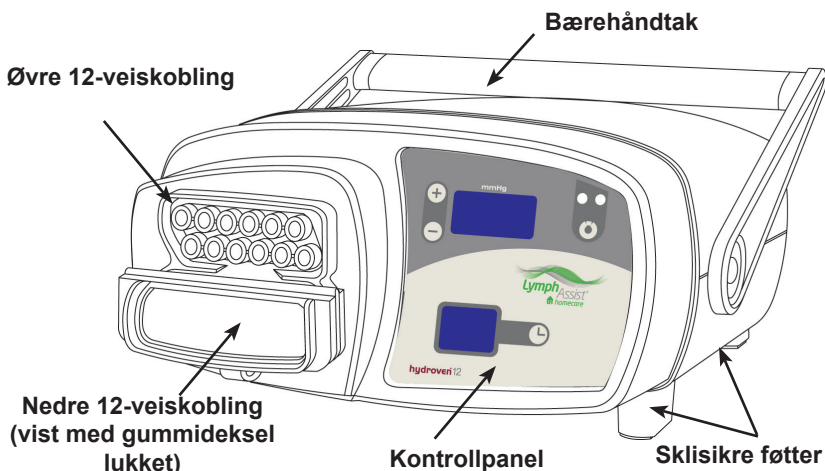

7.1 Plaggkoblinger

Det er to 12-veiskoblinger foran på pumpen. De er dekket av et todelt hengslet gummideksel, som er festet til pumpen med en stropp. Dekselet festes over begge koblingene når pumpen rengjøres, for å unngå at inntrenging av væsker. Plaggene kobles til disse to 12-veiskoblingene, som er sugetilpasset og polariserte for å unngå feil orientering på koblingene. Følgende pumpe-/plaggkoblinger er mulige:

- Hvis to plagg brukes (enten to armplagg, to lårplagg, eller en arm-/lårplagg og et plagginnlegg), vil et bli koblet til den øvre koblingen og det andre til den nedre koblingen. De to koblingene er ombyttbare - begge plagg vil pumpes opp til samme tid og til samme trykk.
- Hvis kun et plagg brukes, må det kobles til den øvre koblingen, og gummidekselet må festes til den nedre koblingen (brettet som vist).

Alle plagg (armplagg, lårplagg og plagginnlegg) har mange kamre. Kamrene pumpes opp i en forutbestemt sekvens.

Oppumping av kamrene følger en forhåndsinnstilt trykkgradient, men tømning av kamrene er effektivt øyeblikkelig.

7.2 Driftsmoduser

Se "Pumpekontroller og indikatorer" for en beskrivelse av kontrollene og indikatorene på pumpen.

Pumpen har følgende tre driftsmoduser:

7.2.1 Standby

Etter at strømforsyningen har blitt koblet til pumpen, vil pumpen utføre en kort selvtest, og deretter gå i Standby.

I Standby-modus:

- Kjør- og Dvalemodusindikatorer er slukket.
- Pumpen viser de tidligere valgte behandlingsinnstillingene.
- Pumpen er klar til å starte behandlingen. Trykk på Kjør-/Standby-knappen for å starte behandlingen.

7.2.2 Hvilemodus

Hvis pumpen har vært i Standby i 10 minutter uten av noen av knappene har blitt trykket, går den i hvilemodus for å spare strøm.

Merk: *Pumpen kan være i hvilemodus for lange perioder uten å koble fra strømforsyningen.*

I Dvalemodus:

- Kun hvilemodusindikatoren på kontrollpanelet lyser.
- Alle andre display og indikatorer er slukket.
- Trykk på Kjør-/Standby-knappen for å sette pumpen i Standby.

7.2.3 Kjør-modus

Pumpen er i kjøør-modus for behandlingsøktens varighet, mens den pumper opp og tømmer plaggene.

I kjøør-modus:

- Kjør-modusindikatoren vil lyse.
- Pumpen stopper automatisk etter den valgte behandlingstiden, og plaggene tømmes.
- Pumpen kan stoppes under behandling ved å trykke Kjør-/Standby-knappen.

Merk: *Tap av strøm vil stoppe behandling.*

7.3 Oppumpingsmoduse

Pumpen har følgende oppumpingsmoduse:

7.3.1 LymphAssist-oppumping


Se diagrammet under for LymphAssist-syklusen.

Merk: **Kammer 1 er på den distale (fot/hånd) enden, og kammer 12 er på den proximale (lår/skulder enden).**

1. Ved innledende anvendelse starter LymphAssist-behandlingen med en enkel peristaltisk bølge-oppumping fra kammer 1 til kammer 12.
2. En LymphAssist-syklus består av følgende sekvens av oppumpinger/tømminger, med start ved kammer 12, deretter 11, 10, osv., ned til kammer 1:

- Det er 5 pulser hvor kammeret pumpes opp og tømmes. Disse kalles LymphAssist-pulser.
- Dette følges av en enkelt "delvis"-peristaltisk bølgeoppumping av del av plagget - mellom neste kammer og kammer 12.

For eksempel, ved kammer 5 blir de 5 LymphAssist-pulsene fulgt av en delvis-peristaltisk bølgeoppumping fra kammer 6 til kammer 12.

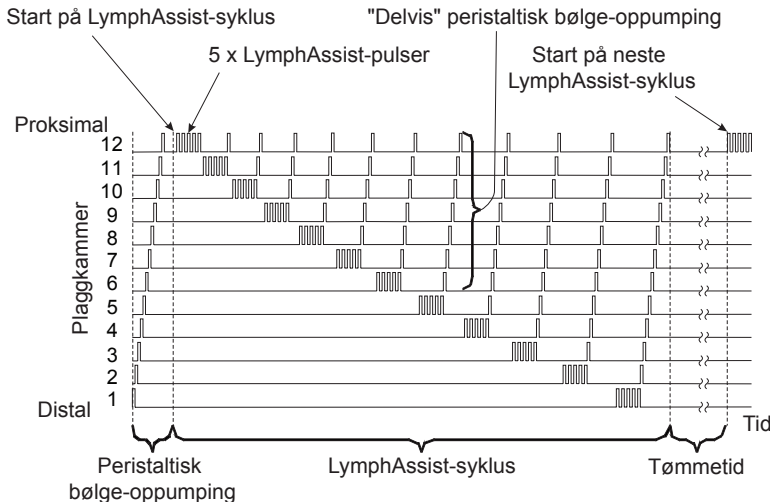

3. Når en delvis-peristaltisk bølgeoppumping kommer til kammer 12, er det en kort forsinkelse, og deretter blir sekvensen med 5 LymphAssist-pulser fulgt av en delvis-peristaltisk bølgeoppumping gjentatt for neste kammer.
4. LymphAssist-syklusen er fullført etter de 5 LymphAssist-pulsene ved kammer 1 og delvis-peristaltisk bølgeoppumping fra kammer 2 til kammer 12.

5. Den neste LymphAssist-syklusen vil starte etter tømmetiden stilt på pumpens kontrollpanel.


Merk: *Maksimalt pumpetrykk som kan settes i LymphAssist-modus er 40 mmHg.*

7.3.2 LymphAssist System

Den LymphAssist Systemet er fabrikkinnstilt til å levere to LymphAssist sykluser som varer ca 35 minutter. Inflasjons tid er forhåndsinnstilt til 80 sekunder og deflasjon tid innstilt er 50 sekunder.

8. Kontroller, indikatorer og alarmer

8.1 Typisk kontrollpanel i køremodus

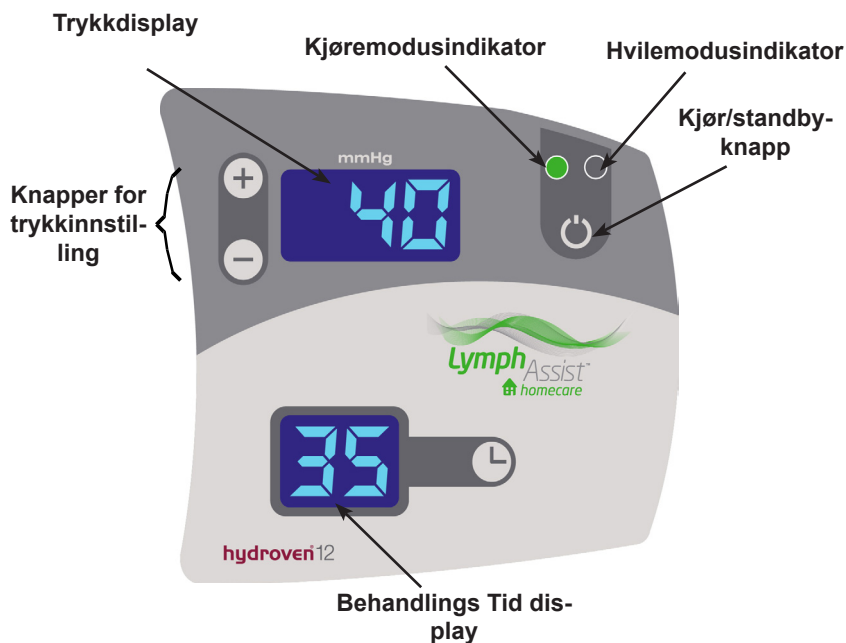

8.2 Pumpekontroller og indikatorer

Pumpens kontrollpanel har følgende kontroller og indikatorer:

Merk: Når en knapp på pumpens kontrollpanel trykkes, vil det høres et "pip" for å bekrefte et gyldig valg.

8.2.1 Kjør-/Standby-knapp og kjø- og hvilemodusindikatorer



- Når pumpen er i standby, er både kjø- og hvilemodusindikatorer slukket.
- Trykk og hold kjø-/Standby-knappen nede i 3 sekunder for å starte pasientbehandlingen. Kjør-modusindikatoren (den venstre av de to indikatorene) lyser for å vise at pumpen er i Kjør-modus.
- Ved slutten av behandlingen, som satt av behandlingsvarighet, vil pumpen stoppe. Pumpen kan stoppes under behandling ved å trykke og holde kjø-/Standby knappen i 3 sekunder. Trykk på kjø-/Standby-knappen etter at pumpen har stoppet for å stille den til Standby.
- Hvis pumpen har vært i Standby i 10 minutter uten av noen av knappene har blitt trykket, går den i hvilemodus for å spare strøm.
- Kun hvilemodusindikatoren (den høyre av de to indikatorene) lyser i hvilemodus, alt annet er effektivt stengt ned.
- Trykk på Kjør-/Standby-knappen for å stille pumpen fra hvilemodus til Standby.

Merk: *Pumpen kan være i hvilemodus for lange perioder uten å koble fra strømforsyningen.*

8.2.2 Trykkvisning og knapper for trykkinnstilling



Verdien vist på Trykkvisningen er det angitte trykket for det første plaggkammeret som pumpes opp.

Den trykkområde er 15-40mmHg.

Trykket kan økes i økninger på 5 mmHg ved å trykke på '+'- og '-'-knappene for trykkinnstilling.

8.2.3 Visning for behandlingsinnstilling



Behandlingsvarighet (i minutter)

- Når behandlingen starter, vil behandlingsvarigheten vist i behandlingsinnstillingsvisningen telle ned for å indikere gjenværende tid (til nærmeste hele minutt).
- Ved slutten av behandlingen, som satt av behandlingsvarighet, vil pumpen stoppe.

8.3 Pumpealarm

8.3.1 Systemfeil

1. Hvis en systemfeil påvises, vil pumpen stoppe.
2. En hørbar alarm vil lyde, og en F-alarmmelding vil vises på behandlingsinnstillingsdisplayet.
3. Koble umiddelbart plagget fra pumpen.
4. Trykk på Kjør-/Standby-knappen for å kjøre selvtesten på pumpen igjen.
5. Hvis feilen ikke kan korrigeres, må en reparatør tilkalles.

9. Drift

Disse instruksjonene dekker den daglige bruken av LymphAssist-systemet. Andre operasjoner, som vedlikehold og reparasjon, bør kun utføres av kvalifisert personell.

Merk: *Se "Kontroller, indikatorer og alarmer" for en omfattende beskrivelse av kontrollene og indikatorene på pumpen.*

Merk: *Hvis driften eller ytelsen på pumpen endres under bruk, se "Rutinemessig vedlikehold" før en reparatør tilkalles, eller ditt lokale Huntleigh salgskontor kontaktes.*



ADVARSEL: *Poser levert med dette utstyret kan utgjøre en kvelningsrisiko. For å unngå risikoen for kvelning, må posene holdes vekk fra babyer og små barn.*



ADVARSEL: *Sørg for at systemet er satt opp slik at strømkabelen ikke utgjøre en snuble- eller kvelningsfare.*

9.1 Klargjøring av systemet

1. Ta systemet ut av emballasjen. Du skal ha følgende artikler:
 - Hydroven 12 LymphAssist Homecare-pumpe.
 - Hydroven 12 plagg (arm eller lår).
 - Hydroven 12 plagginnlegg (ekstrauststyr).
2. Kontroller at plagget er korrekt størrelse for lemmet, og at et plagginnlegg brukes om nødvendig (se "Plaggdimensjoner").
3. Åpne glidelåsen på plagget.
4. Gjør følgende hvis et plagginnlegg skal festes på plagget:
 - Plasser plagginnlegget mellom de to halvdelene av plaggets glidelås. Kontroller at orienteringen på plagget og innlegget er korrekt: de to slangesettene bør være på samme ende og på utsiden av plagget og innlegget.
 - Fest den ene av glidelåsene mellom plagget og innlegget, og la den andre være løs.
5. Før plagget (og innlegget, om montert) festes på lemmet, festes de første 150 mm (6") av den åpne glidelåsen. Plasser plagget (og innlegget) på lemmet og lukk glidelåsen helt.
6. Kontroller at pasienten er i en komfortabel posisjon med lemmet støttet eller hevet som nødvendig.

7. Koble plagget/plaggene til de to 12-veiskoblingene på pumpen som følger:
 - Hvis to plagg brukes (enten to armplagg, to lårplagg, eller en arm-/lårplagg og et plagginnlegg), vil et bli koblet til den øvre koblingen og det andre til den nedre koblingen. De to koblingene er ombyttbare - begge plagg vil pumpes opp til samme tid og til samme trykk.
 - Hvis kun et plagg brukes, må det kobles til den øvre koblingen, og gummidekselet må brettes og festes til den nedre koblingen.

Merk: ***Koblingene er sugetilpasset og polariserte for å unngå feil orientering.***

8. Hvis pasienten setter opp eller opererer systemet på egen hånd, må det sørges for at:
 - Pumpen settes opp **før** plaggene festes.
 - Plaggene er koblet til pumpen før de festes på lemmene.
9. Koble strømstøpselet i en passende stikkontakt.
10. Slå på strømforsyningen til pumpen.
11. Pumpen vil utføre en kort selvtest, og deretter gå i Standby. Selvtesten kan ta mellom 15 og 20 sekunder.
12. Kjør- og Dvalemodusindikatorer er slukket.
13. Trykket displayet på pumpen kontrollpanelet vil vise den tidligere valgte trykkinnstilling .
14. Sjekk skjerm terapi innstillingen leser 35.

9.2 Starte behandling

1. Sørg for at pumpen er i Standby.

Merk: *Sørg for at alle glidelåser på plagg er fullstendig festet før behandling starter.*

2. Trykk og hold kjøør-/Standby-knappen nede i 3 sekunder for å starte pasientbehandlingen.
3. Kjør-modusindikatoren vil lyse, og behandlingsinnstillings- og trykkdisplayene vil vise de tidligere valgte innstillingene.
4. Pumpen vil gå gjennom en oppstartsprosess (denne oppstarten kan ta opptil 15 sekunder).
5. Ved slutten av oppstartsprosessen vil pumpekompressoren starte og plagget/plaggene vil begynne å pumpes opp.
6. Når behandlingen starter, vil behandlingsvarigheten vist i behandlingsinnstillingsvisningen telle ned for å indikere gjenværende tid (til nærmeste hele minutt).



FORSIKTIG: Ikke sett plagget på lemmet med mindre glidelåsen er delvis lukket, da du kan skade glidelåsen.



FORSIKTIG: Ikke løsne glidelåser eller prøv å ta av plagg under behandlingsøkten, da du kan skade glidelåsene. Sørg for at behandlingsøkten har stoppet, og at plaggene er tømt før du tar dem av.



FORSIKTIG: Ikke stå eller gå under behandlingsøkten hvis du har på lårplagg.

9.3 Stoppe behandling

1. Det er to måter å stoppe behandlingen på:
 - Pumpen stopper automatisk etter den valgte behandlingstiden, og plaggene tømmes.
 - Pumpen kan stoppes under behandling ved å trykke og holde kjøør-/Standby-knappen i 3 sekunder. Pumpen vil ikke stoppe umiddelbart, da det tar noen sekunder å tømme plagget.
2. Når plaggene har blitt tømt, endrer både behandlingsinnstillings- og trykkdisplayene til null, og pumpen piper 5 ganger for å bekrefte at behandlingsøkten har blitt fullført.
3. Kjør-indikatoren slukker.
4. Trykk på Kjør-/Standby-knappen for å sette pumpen i Standby.

10. Dekontaminering

Følgende prosesses anbefales, men bør tilpasses for å overholde lokale og nasjonale retningslinjer (Dekontaminering av medisinske enheter) som kan gjelde for helseinstitusjonen eller landet. Hvis du er usikker, bør du søke råd fra din lokale infeksjonskontrollspesialist.

Hydroven 12-systemet bør rutinemessig dekontamineres mellom pasienter og til jevnlige intervaller når det er i bruk, noe som er god praksis for alle gjenbrukbare medisinske enheter.



ADVARSEL: Koble strømforsyningen fra pumpen ved å koble strømkabelen fra stikkkontakten før rengjøring. Beskyttende klær bør alltid brukes ved utføring av dekontamineringsprosedyrer.



FORSIKTIG: Ikke bruk fenol-baserte løsninger eller slipende preparater eller puter under dekontamineringsprosessen, da disse vil skade overflaten. Unngå å senke elektriske deler i vann under rengjøringsprosessen. Ikke spray rengjøringsmidler direkte på pumpen. Ikke senk slangene ned i vann.

10.1 Rengjøring

Rengjør alle eksponerte overflater og fjern all organisk smuss ved å tørke med en klut fuktet med et enkelt (nøytralt) vaskemiddel og vann.

Ikke la vann eller rengjøringsmidler samle seg på pumpens overflate.

10.2 Kjemisk desinfisering

Vi anbefaler et klorløsende middel, som f.eks. natriumhypokloritt, ved en styrke på 1000 ppm tilgjengelig klorin (dette kan variere fra 250 ppm til 10.000 ppm avhengig av lokal politikk og kontamineringsstatus).

Tørk alle rengjorte overflater med løsninger, og tørk deretter med en klut fuktet med vann, og la tørke fullstendig.

Alkohol-baserte desinfeksjonsmidler (styrke 70 %) kan brukes som et alternativ.

Sikre at produktet er tørt før lagring.

Hvis et alternativt desinfeksjonsmiddel velges fra det store tilgjengelige utvalget, anbefaler vi at bruksegnethet bekreftes med kjemikalieleverandøren før bruk.

10.3 Rengjøring og sterilisering av plagg

Tørk av plagg med et nøytralt rensemiddel eller såpepulver ved 40 °C. Tørk grundig.

Etter rengjøring er gassterilisering mulig, men:

- Ikke overskrid 51 °C (120 °F).
- Skal ikke autoklaveres.

11. Rutinemessige vedlikehold

11.1 Hydroven 12 LymphAssist Homecare system

11.1.1 Vedlikehold

Dette utstyret har blitt utviklet til å være så og si vedlikeholdsfritt mellom serviceperioder.

11.1.2 Service

Huntleigh vil på oppfordring gjøre servicemanualer, komponentlister og annen informasjon som er nødvendig for at Huntleigh-opplært personale skal kunne reparere systemet tilgjengelig.

11.1.3 Serviceperiode

Huntleigh anbefaler at Hydroven 12 LymphAssist Homecare pumpe gjennomgår service hver 24. måned av en Huntleigh-godkjent service-agent.

11.2 Generelt stell, vedlikehold og inspeksjon

11.2.1 Pumpe

Kontroller alle elektriske koblinger og strømkabel for tegn på slitasje. Hvis pumpen utsettes for unormal behandling, f.eks. senket i vann eller sluppet, må enheten returneres til et autorisert servicesenter.

11.2.2 Plagg

Inspiser plagget for tegn på slitasje eller flenger, og kontroller at alle glidelåser og festemidler er sikre. Kontroller sikkerheten på alle interne pneumatiske koblinger.

11.3 Serienummeretiketter

11.3.1 Pumpe

Serienummeretiketten er vanligvis plassert bak på pumpen. Oppgi dette serienummeret ved anmodning om service.

11.3.2 Plagg

Serienummeretiketten er festet til plagget.

12. Feilsøking

Følg feilsøkingerveiledningen under hvis du støter på et problem. Kontakt service hvis feilen ikke kan korrigeres.

Feil	Sjekk	Løsning
Pumpen fungerer ikke.	Er strømbryteren på?	Kontroller bryter.
	Er strømkabelen korrekt tilkoblet?	Kontrollere koblinger.
	Sikring sprengt?	Tilkall reparatør.
Pumpen fungerer, men plagget pumpes ikke opp.	Blokkering i plaggets forsyningsslange.	Sikre at slangen alltid er tom.
	Plagg ikke korrekt koblet til pumpe.	Kontrollere koblinger.
	Luftlekkasje i plagg.	Kontroller plagg. Bytt ut hvis defekt.
Behandlingsinnstillingsdisplay viser "F"	-	Intern feil. Returner pumpen for service.

Merk:

Hvis feilsøkingprosedyrer ikke returnerer systemet til normal ytelse, må bruk av systemet stoppes øyeblikkelig og reparatør tilkalles, eller enheten returneres til Huntleigh for service. Se "Garanti og service".

13. Tilbehør

Plagg og plagginnlegg				
Armplaggdimensjoner				
Plaggdelnr.	316A68		316A78	
Lengde (skulder til fingerspisser)	68 cm (26,8")		78 cm (30,7")	
Omkrets (ved skulder)				
Armplagg	62 cm (24,4")		62 cm (24,4")	
Med plagginnlegg	79 cm (31,1")		79 cm (31,1")	
Tilsvarende innleggsdel delenr.	316AI68		316AI78	
Bredde på innlegg (ved skulder)	17 cm (6,7")		17 cm (6,7")	
Lårplagg dimensjoner	Standard		Stor	
Plaggdelnr.	316L76S	316L84S	316L76W	316L84W
Lengde (topp av lår til hæl)	76 cm (29,9")	84 cm (33,1")	76 cm (29,9")	84 cm (33,1")
Omkrets (ved topp av lår)				
Lårplagg	71 cm (28,0")	71 cm (28,0")	79 cm (31,1")	79 cm (31,1")
med plagginnlegg	90 cm (35,4")	90 cm (35,4")	98 cm (38,6")	98 cm (38,6")
Tilsvarende innleggsdel delenr.	316LI76	316LI84	316LI76	316LI84
Bredde på innlegg (ved topp av lår)	19 cm (7,5")	19 cm (7,5")	19 cm (7,5")	19 cm (7,5")
Materialer				
Indre materiale	PU-belagt strikket nylon			
Ytre materiale:	Dobbelt PU-belagt vevd nylon			



ADVARSEL: Bruk bare anbefalt tilbehør oppført i denne håndboken.

14. Spesifikasjoner

14.1 Utstyrsklassifisering

Type beskyttelse mot elektrisk støt.	Klasse II, dobbelisolert
Grad av beskyttelse mot elektrisk støt 	Type BF
Driftsmodus.	Kontinuerlig
Grad av beskyttelse mot faststoff- og væskeinntrenging	IP21 - Beskyttelse mot inntrenging av solide objekter på mer enn 12,5 mm diameter og vanndråper som faller vertikalt.
Grad av sikkerhet ved bruk i nærheten av et brennbart bedøvelsesmiddel	Utstyret er ikke egnet for bruk i nærheten av BRENNBART BEDØVELSES MIDDEL MED LUFT, OKSYGEN ELLER LYSTGASS

14.2 Generelt

Modell	Hydroven 12 LymphAssist Homecare System
Denumre	LymphAssist/HC
Trykkområde	15 - 40 mmHg $\pm$ 5%
Forsyningsspenning	100 - 230 V AC
Forsyningsfrekvens	50 - 60 Hz
Sikringstype	5A til BS1362 (kun Storbritannia)
Strøminntak	60-95 VA
Boksmateriale	Brannsikker ABS-plast
Størrelse	250 x 130 x 290 mm
Vekt	3,8 kg

14.3 Miljø

Tilstand	Temperaturområde	Relativ fuktighet	Atmosfærisk trykk
Drift	10 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F)	30 % til 75 % (ikke-kondenserende)	700 til 1060 hPa
Lagring og transport (Langsiktig)	10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)	20 % til 95 % (ikke-kondenserende)	700 til 1060 hPa
Lagring og transport (Kortsiktig)	-25 °C til 70 °C (-13 °F til 158 °F)	20 % til 95 %	500 til 1060 hPa


Merk: Når eksponert for ekstrem temperatur under lagring, må pumpen få justere seg til normale temperaturer i minst 12 timer før bruk. Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i fremskyndet slitasje av mekaniske komponenter.

14.4 Samsvar med standarder


EN60601-1:1990/A13:1996 og IEC 60601-1:1988/A2:1995	Medisinsk elektrisk utstyr del 1 Generelle krav til sikkerhet
UL60601-1, UL2601-1 og CAN/CSA C22.2 nr. 601.1-M90	
EN60601-1:2006 og IEC 60601-1:2005	
AAMI/ANSI ES60601-1:2006 og CAN/CSA C22.2 nr. 60601.1(2008)	
EN60601-1-11: 2010	
EN60601-1-2: 2001	Generelle krav til sikkerhet: Elektromagnetisk kompatibilitet
BS EN 980: 2008	Symboler for bruk til merking av medisinsk utstyr

15. Produktmerking

Symboler			
	Hydroven 12 er klasse II, dobbeltisolert i henhold til definisjonene i BS EN 60601-1:1990		
	Deler er type BF i henhold til definisjonene i BS EN 60601-1:1990		
	Se dette dokumentet (bruksinstruksjoner) for en beskrivelse av produktklassifiseringen (3. utgave).		
	Standby. Merk: Enhet er ikke isolert fra strømforsyning.		
	Med hensyn til elektrisk støt, brann og mekaniske farer kun i samsvar med CAN/CSA-C22.2 nr. 60601.1 (2008). MEDISINSK UTSTYR		
	Dette symbolet angir at dette produktet, inkludert tilbehør og forbruksvarer, er underlagt bestemmelsene i WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), og må kasseres på en ansvarlig måte i henhold til lokale prosedyrer.		
	Se dette dokumentet (bruksinstruksjoner) for en beskrivelse av produktklassifiseringen (2. utgave).		
	Dette symbolet angir at dette produktet er i samsvar med de viktige kravene i direktivet for medisinsk utstyr (Medical Devices Directive) 93/42/EEC med tillegg ifølge 2007/47/EC		
	Følg bruksanvisningen		Vekselstrøm (VS)
	Serienummer		Referansenummer
	Produsent		Pappemballasje kan gjenvinnes.

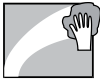Rengjøringssymboler			
	Tørk overflaten med fuktig klut		Bruk løsning fortynnet til 1000 ppm tilgjengelig klorin
	Må ikke strykes		Ikke bruk fenol-baserte rengjøringsmidler
	Må ikke renses		Ikke bruk tørketrommel

16. Avhendig ved levetidsslutt

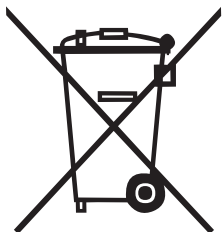

Dette symbolet angir at dette produktet, inkludert tilbehør og forbruksvarer, er underlagt bestemmelsene i WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), og må kasseres på en ansvarlig måte i henhold til lokale prosedyrer.

17. Garanti og service

Standardvilkårene for Huntleigh Healthcare Diagnostic Products Division gjelder alle salg. En kopi er tilgjengelig på forespørsel. Disse inneholder alle detaljer om garantibetingelser, og begrenser ikke forbrukers lovbestemte rettigheter.

17.1 Servicereturer

Kun Storbritannia

Hvis Hydroven 12 må returneres, følges denne fremgangsmåten:

- Rengjør produktet i henhold til instruksjonene i denne håndboken.
- Pakk det inn i egnet emballasje.
- Fest en dekontamineringserklæring (eller annen erklæring som viser at produktet er rengjort) til utsiden av pakken.
- Merk pakken med 'Serviceavdeling'

Du finner flere detaljer i NHS-dokumentet HSG(93)26.

Huntleigh Healthcare Ltd forbeholder seg retten til å returnere produkter som ikke inneholder en dekontamineringserklæring.

Serviceavdeling.

Huntleigh Healthcare, Diagnostic Products Division,
35, Portmanmoor Rd.,
Cardiff. CF24 5HN
Storbritannia.

Tlf: +44 (0)29 20485885

Telefaks: +44 (0)29 20492520

E-post: sales@huntleigh-diagnostics.co.uk
service@huntleigh-diagnostics.co.uk
www.huntleigh-diagnostics.com

Internasjonale kunder

Kontakt ditt lokale kontor, oppført på innsiden av bakre omslag.

INTERNASJONAL

ArjoHuntleigh International Ltd
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tlf: +44 (0) 1582 745 800
Telefaks: +44 (0) 1582 745 866
E-post: international@arjohuntleigh.com

TSYSKLAND

HNE Healthcare GmbH
Industriering Ost 66
DE-47906 Kempen
Tlf: +49 (0) 2152 551110
Telefaks: +49 (0) 2152 551120
E-post: verkauf@huntleigh.de

SVERIGE

ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tlf: +46 (0) 10 494 7760
Telefaks: +46 (0) 10 494 7761
E-post: kundservice@arjohuntleigh.com

NORGE

ArjoHuntleigh Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tlf: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-post: no.kundeservice@arjohuntleigh.com

DANMARK

ArjoHuntleigh A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tlf: +45 49 13 84 86
Telefaks: +45 49 13 84 87
E-post: dk_kundeservice@arjohuntleigh.com

USA

ArjoHuntleigh Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tlf: +1 630 307 2756
Gratis: +1 800 323 1245 Institutional
Gratis: +1 800 868 0441 Home Care
Telefaks: +1 630 307 6195
E-post: us.info@arjohuntleigh.com

CANADA

ArjoHuntleigh
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Gratis: +1 800 665 4831 Institutional
Gratis: +1 800 868 0441 Home Care
Telefaks: +1 905 238 7881
E-post: info.canada@arjohuntleigh.com

AUSTRALIA

ArjoHuntleigh Pty Ltd
78, Forsyth Street
O'Connor
AU-6163 Western Australia
Tlf: +61 89337 4111
Gratis: +1 800 072 040
Telefaks: + 61 89337 9077

NEW ZEALAND

ArjoHuntleigh Ltd
41 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tlf: +64 (0) 9 573 534
Free Call: 0800 000 151
Telefaks: +64 (0) 9 573 5384
E-post: nz.info@ArjoHuntleigh.com

As a proud member of the Arjo family, we have been committed to supporting healthcare professionals in improving outcomes and enhancing patient wellbeing since 1979. We do this through our proven solutions for Vascular Assessment & Treatment and Fetal & Patient Monitoring. With innovation and customer satisfaction as our guiding principles, we strive for clinical excellence and improved performance, for life.



Huntleigh Healthcare Ltd. 35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom
T: +44 (0)29 20485885 F: +44 (0)29 20492520 sales@huntleigh-diagnostics.co.uk
www.huntleigh-diagnostics.com



Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office:
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF
©Huntleigh Healthcare Limited 2014



A Member of the Arjo Family

® and ™ are trademarks of Huntleigh Technology Limited

As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to modify designs without prior notice.

AW:1001008-4

779390-NO-2